

D3 Personal Massage Gun

Manual de Uso



LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR

Obrigado por escolher nosso produto. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e preste atenção especial às precauções de segurança para operar e usar este produto de maneira correta.

Este manual fornece um modo de operação seguro e eficaz para os usuários. Guarde este manual cuidadosamente para uma futura dúvida.

CONTEÚDO

Precauções de segurança.....	01-02
Sintomas Adaptativos.....	02
Parâmetros do Produto.....	03
Características técnicas do produto.....	03
Uso.....	04
Proibição de uso.....	05
Carregamento.....	05
Manutenção, transporte e armazenamento.....	06
Inspeção de Produto.....	Útima Página

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

▲ Proibição

1. Crianças e adolescentes estão proibidos de usá-lo.
2. Contra-indicado o uso sobre áreas lesionadas.
3. Consulte um profissional de saúde se quiser utilizar este equipamento após ter sofrido alguma lesão muscular.
4. Pessoas com aneurisma, hemorragia ou uso de anticoagulante são proibidas de usar este produto.
5. É proibido o uso em áreas sensíveis, como cabeça, rosto, vértebra cervical, etc.
6. É proibido o uso na superfície da pele úmida e suja. Pode ser usado na roupa. Pressione suavemente e mova sobre a pele por no máximo 60 segundos em cada parte.
7. É contra-indicado o uso deste aparelho sobre estruturas ósseas. Utilize-o apenas sobre os tecidos moles do corpo, sem gerar dor ou desconforto.
8. Não use este produto se sentir contusão, dor ou outro desconforto.
9. É contra-indicado utilizar este produto em uma distância menor do que 3 polegadas antes de 90 dias após cirurgias;
10. É proibido mergulhar este produto na água.
11. Não jogue este produto no fogo nem o aproxime de uma fonte de fogo.
12. Não deixe cair este produto deliberadamente.
13. É proibido desmontar este produto de qualquer forma.
14. Não aproxime o aparelho ligado na região da coluna cervical superior e na região posterior da cabeça, massageie com os dedos, para evitar lesões.
15. É proibido o uso por crianças menores de 8 anos. Crianças são proibidas de usar, limpar e manter este produto sem supervisão.

- 01 -

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E INDICAÇÕES

▲ Notas

Consulte um profissional da saúde em caso de qualquer circunstância abaixo.

1. Em caso de gravidez
2. Pessoas usando marca-passo ou desfibrilador
3. Pacientes com cirurgia recentemente
4. Pacientes com cardiopatia e câncer
5. Pessoas com anormalidade antiesterno, articular ou óssea
6. Complicando doenças causadas por outros doenças (tais como a neuropatia diabética ou danos na retina, etc.)

Atualmente, os pesquisadores estudam o impacto da terapia percussiva em diferentes condições patológicas específicas. Provavelmente isto pode reduzir as contra-indicações acima. A experiência clínica demonstra que a terapia percussiva integrada a um plano terapêutico pode trazer inúmeros benefícios. Seu uso deve ser orientado e acompanhado de um profissional de saúde capacitado.

※ Principais Indicações

- Dor e espasmo causados por contusão muscular, tensão, entorse
- Melhora do fluxo dos fluidos na área do edema auxiliando a remoção
- Mobiliza o tecido conjuntivo.
- Auxilia na redução dos resíduos metabólicos muscular por ativ. física.
- Melhora a amplitude de movimento articular.
- Diminui a fadiga muscular

- 02 -

PARÂMETRO DO PRODUTO E DIAGRAMA DO PRODUTO

※ Características Técnicas do Produto

Nome	D3 PTM	Material	Placa de liga de alumínio para aviação
Input	5V=	Porta do carregador	Tipo-C
Dimensão do Produto	97×47×142 mm	Capacidade de Carga Potência	2000mAh
Ponteiras	4	Executive standards	40W
Normas	4 Velocidades	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008

※ Personal Gun e Cabeças de Massage



- 03 -

USO

※ Inicialização / desligamento

- Esta máquina será inicializada após pressionar a tecla por três
- A luz do sinal permanece acesa após a inicialização. A luz verde está LIGADA e os quatro indicadores são ativados em seqüências.


- A máquina desligou após você pressionar a tecla por 3s.

※ Ajuste de intensidade

- Primeira velocidade inicial após a partida.
- Clique na tecla do equipamento uma vez para aumentar uma velocidade.
- A velocidade máxima é a quarta, clique na chave para voltar para a primeira velocidade.



※ Substituição da cabeça de massage

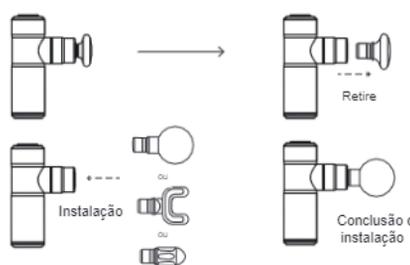


- 04 -

PROIBIÇÃO DE USO E CARREGAMENTO

▲ Proibição

- Não toque nesta parte quando a máquina iniciar sem instalação da cabeça de massage para evitar lesão.
- Não toque nesta parte quando a máquina iniciar com instalação da cabeça de massage para evitar lesão.

※ Carregamento

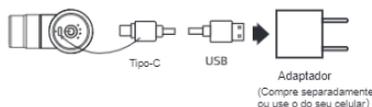

- Carregue totalmente antes de usar pela primeira vez.
- A luz de sinalização vermelha está LIGADA durante o carregamento e a luz de sinal verde está LIGADA depois de totalmente carregado.
- A luz do sinal pisca três vezes a cada 5s quando está em potência total;
- A luz de sinal pisca duas vezes a cada 5s quando a carga da bateria está abaixo de 60%;
- A luz de sinal pisca uma vez a cada 5s quando a carga da bateria está abaixo de 30%;
- A luz vermelha pisca quando a carga da bateria está abaixo de 10%. Carregue o mais rápido possível.

• Carregue o equipamento após o desligamento para garantir a segurança do produto e uso. Não use a PTMG carregando.

- 05 -

MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

※ Manutenção

- Limpe o equipamento com um pano úmido e seque com um pano macio ;
- Guarde este equipamento na caixa de embalagem se não for usado por muito tempo ;
- Não tente desmontar o equipamento.
- Carregue este produto uma vez por mês se o equipamento não for usado por um longo período de tempo para que não encurte a vida útil da bateria.

※ Armazenamento

- Mantenha este produto em um depósito bem ventilado e livre de gases corrosivos 250 mm acima do solo ;
- É proibido empilhar mais de cinco camadas ;
- Guarde este equipamento em embalagem limpa e carregue-o mensalmente se não for utilizado por um longo período de tempo para evitar umidade e diminuir a vida útil da bateria.

※ Transporte

- Este produto é adequado para transporte automotivo, de trem, navio e avião ;
- Fixe este produto no transporte para evitar vibração violenta, colisão, rolar e cair. Mantenha para cima. Seja gentil com o manuseio. Mantenha-o longe da chuva, seha cuidadoso;
- É proibido empilhar mais de cinco camadas.


- 06 -

GARANTIA SE DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA, ESTE PRODUTO FALHAR DEVIDO A UM DEFEITO NO MATERIAL OU NA FABRICAÇÃO. A D3, POR MEIO DE SEU FORNECEDOR REPARA, OU SUBSTITUI O PRODUTO. ESTA GARANTIA EXCLUI:

- (a) danos causados por acidente, abuso, manuseio incorreto ou transporte;
- (b) unidades sujeitas a reparações não autorizadas;
- (c) unidades não utilizadas de acordo com as instruções de cuidados da D3 PTMG;
- (d) danos que excedam o custo do produto;
- (e) deterioração do produto entregue resultante de condições anormais de armazenamento e / ou salvaguarda nas instalações do cliente. e
- (f) falha em fornecer a prova de compra datada (Nota Fiscal).

D3 Personal Massage

Manual de Uso

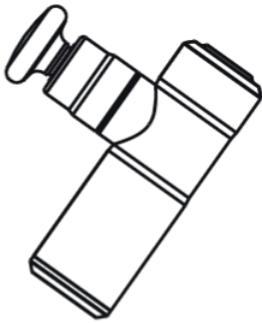

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR

Obrigado por escolher nosso produto. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e preste atenção especial às precauções de segurança para operar e usar este produto de maneira correta.

Este manual fornece um modo de operação seguro e eficaz para os usuários. Guarde este manual cuidadosamente para uma futura dúvida.

CONTEÚDO

Precauções de segurança.....	01-02
Sintomas Adaptativos.....	02
Parâmetros do Produto.....	03
Características técnicas do produto.....	03
Uso.....	04
Proibição de uso.....	05
Carregamento.....	05
Manutenção, transporte e armazenamento.....	06
Inspeção de Produto.....	Última Página

PRECAUÇÕES DE

Proibição

01. Crianças e adolescentes estão proibidos de usá-lo.
02. Contra-indicado o uso sobre áreas lesionadas.
03. Consulte um profissional de saúde se quiser utilizar este equipamento após ter sofrido alguma lesão muscular.
04. Pessoas com aneurisma, hemorragia ou uso de anticoagulante são proibidas de usar este produto.
05. É proibido o uso em áreas sensíveis, como cabeça, rosto, vértebra cervical, etc.
06. É proibido o uso na superfície da pele úmida e suja. Pode ser usado na roupa. Pressione suavemente e mova sobre a pele por no máximo 60 segundos em cada parte.
07. É contra-indicado o uso deste aparelho sobre estruturas ósseas. Utilize-o apenas sobre os tecidos moles do corpo sem gerar dor ou desconforto.
08. Não use este produto se sentir contusão, dor ou outro desconforto.
09. É contra-indicado utilizar este produto em uma distância menor do que 3 polegadas 90 dias após cirurgias;
10. É proibido mergulhar este produto na água.
11. Não jogue este produto no fogo nem o aproxime de uma fonte de fogo.
12. Não deixe cair este produto deliberadamente.
13. É proibido desmontar este produto de qualquer forma.
14. Não aproxime o aparelho ligado na região da coluna cervical superior e na região posterior da cabeça, massageie com os dedos, para evitar lesões.
15. É proibido o uso por crianças menores de 8 anos. Crianças são proibidas de usar, limpar e manter este produto sem supervisão.

- 01 -

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E INDICAÇÕES

Notas

Consulte um profissional da saúde em caso de qualquer circunstância

1. Em caso de gravidez
2. Pessoas usando marca-passo ou desfibrilador
3. Pacientes com cirurgias recente
4. Pacientes com cardiopatia e câncer
5. Pessoas com anormalidade antiesterno, articular ou óssea
6. Complicações causadas por doenças (tais como a neuropatia diabética ou danos na retina, etc.)

Atualmente, os pesquisadores estudam o impacto da terapia percussiva em diferentes condições patológicas específicas. Provavelmente isto pode reduzir as contra-indicações acima. A experiência clínica demonstrar que a terapia percussiva integrada a um plano terapêutico pode trazer inúmeros benefícios. Seu uso deve ser orientado e acompanhado de um profissional de saúde capacitado.

Principais Indicações

- Dor e espasmo causados por contusão muscular, tensão, entorse
- Melhora do fluxo dos fluidos na área do edema auxiliando a remoção
- Mobiliza o tecido conjuntivo.
- Auxilia na redução dos resíduos metabólicos muscular por ativ.
- Melhora a amplitude de movimento articular.
- Diminui a fadiga muscular

- 02 -

PARÂMETRO DO PRODUTO E DIAGRAMA DO PRODUTO

Características Técnicas do Produto

Nome	D3 PTM	Material	Placa de liga de alumínio para aviação
Input	5V==	Porta do carregador	Tipo-C
Dimensão do Produto	97×47×142 mm	Capacidade de Carga	2000mAh
Ponteiras	4	Potência	40W
Velocidades	4 Velocidades	Executive standards	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Personal Massage e Ponteiras



- 03 -

USO

Inicialização / desligamento

• Esta máquina será inicializada após pressionar a tecla por três 3s.

• A luz do sinal permanece acesa após a inicialização. A luz verde está LIGADA e os quatro indicadores são ativados em sequências.


• A máquina desligou após você pressionar a tecla por 3s.

Ajuste de intensidade

- Primeira velocidade inicial após a partida
- Clique na tecla do equipamento uma vez para aumentar uma velocidade.
- A velocidade máxima é a quarta, clique na chave para voltar para a primeira velocidade.



Substituição da cabeça de massagem

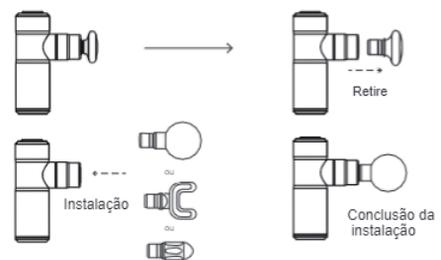

- 04 -


PROIBIÇÃO DE USO E CARREGAMENTO

Proibição

• Não toque nesta parte quando a máquina iniciar sem instalação da cabeça de massagem para evitar lesão.

• Não toque nesta parte quando a máquina iniciar com instalação da cabeça de massagem para evitar lesão.

Carregamento

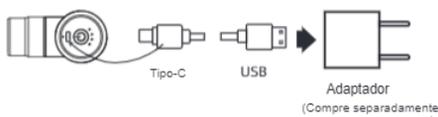

Carregue totalmente antes de usar pela primeira vez.

• A luz de sinalização vermelha está LIGADA durante o carregamento e a luz de sinal verde está LIGADA depois de totalmente carregado.

• A luz do sinal pisca três vezes a cada 5s quando está em potência total;

A luz de sinal pisca duas vezes a cada 5s quando a carga da bateria está abaixo de 60%;

A luz de sinal pisca uma vez a cada 5s quando a carga da bateria está abaixo de 30%;

A luz vermelha pisca quando a carga da bateria está abaixo de 10%. Carregue o mais rápido possível.

Carregue o equipamento após o desligamento

MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Manutenção

• Limpe o equipamento com um pano úmido e seque com um pano macio ;

• Guarde este equipamento na caixa da embalagem se não for usado por muito tempo ;

• Não tente desmontar o equipamento.

• Carregue este produto uma vez por mês se o equipamento não for usado por um longo período de tempo para que não encurte a vida útil da bateria.

Armazenamento

• Mantenha este produto em um local bem ventilado e livre de gases corrosivos 250 mm acima do solo ;

• É proibido empilhar mais de cinco camadas ;

• Guarde este equipamento em embalagem limpa e carregue-o mensalmente se não for utilizado por um longo período de tempo para evitar umidade e diminuir a vida útil da bateria.

Transporte

• Este produto é adequado para transporte automotivo, de trem, navio e avião ;

• Fixe este produto no transporte para evitar vibração violenta, colisão, rolar e cair. Mantenha para cima. Seja gentil com o manuseio. Mantenha-o longe da chuva, seja cuidadoso;

• É proibido empilhar mais de cinco caixas

GARANTIA

SE DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA, ESTE PRODUTO FALHAR DEVIDO A UM DEFEITO NO MATERIAL OU NA FABRICAÇÃO, A D3. POR MEIO DE SEU FORNECEDOR REPARA, OU SUBSTITUI O PRODUTO. ESTA GARANTIA EXCLUI:

- (a) danos causados por acidente, abuso, manuseio incorreto ou transporte;
- (b) unidades sujeitas a reparações não autorizadas;
- (c) unidades não utilizadas de acordo com as instruções de cuidados da D3 PTMG;
- (d) danos que excedam o custo do produto;
- (e) deterioração do produto entregue resultante de condições anormais de armazenamento e / ou salvaguarda nas instalações do cliente, e
- (f) falha em fornecer a prova de compra datada (Nota Fiscal).